

CE
0318

- Este producto contiene látex de caucho natural.** El látex puede provocar reacciones alérgicas incluido el choque anafiláctico. Si le ocurre a Ud. o a su pareja, busque atención médica inmediatamente.
- Conservar los preservativos en un lugar fresco y seco, apartados de la luz solar y del calor.**
- No sacar el preservativo de su envase individual hasta el momento de su utilización. No utilizar si el preservativo no se ha conservado en las condiciones adecuadas (exposición a altas temperaturas).

■■■■■

If you need additional lubrication, use only water-based lubricants such as glycerine. Do not use oil-based lubricants such as petroleum jelly, paraffin, baby oil, body lotions, massage oils, butter, margarine, etc. as they can damage the latex condom.

Prezervativul este pentru o singură utilizare. Dacă prezervativul este folosit de mai multe ori, crește riscul ca acesta să se rupă sau să se deterioreze, precum și riscul de transmitere a bolilor cu transmitere sexuală și de sarcină. Nu îl folosiți niciodată. Dacă prezervativul se rupe în timpul actului sexual, renunțați imediat la baza penisului. Dacă prezervativul se desface, acesta poate fi

PT **PRESERVATIVOS DE LÁTEX LUBRIFICADOS**
INSTRUÇÕES DE USO, CONSERVAÇÃO E ELIMINAÇÃO



 Para conseguir a máxima proteção é importante seguir as instruções de uso

- [illegible]

O contacto do preservativo com zonas de pêlo rapado ou "piercing" aumenta o risco de ruptura ou deterioração.

Se deseja uma lubrificação adicional, utilize só lubrificante de base aquosa como a vaselina, parafina, óleo infantil, loções corporais, óleos para massagens, manteiga, margarina, etc. podem danificar o preservativo de látex.

O uso não vaginal do preservativo pode aumentar o risco de deterioração ou desprendimento do mesmo.

Alguns medicamentos de aplicação tópica podem afectar a eficácia dos preservativos de látex. Antes de usar o preservativo, consulte um médico ou um farmacêutico sobre a compatibilidade destes produtos com os preservativos de látex.

Este produto contém látex de borracha natural. O látex pode causar reações alérgicas, incluindo choque anafilático. Se isso acontecer com você ou seu parceiro, procure orientação médica imediatamente.

Guardar os preservativos num lugar fresco e seco, afastados da luz solar e do calor.

Não retirar do envoltório individual até ao momento da sua utilização.

Não reutilizar o preservativo. Abandonar o preservativo usado imediatamente.

INFORMAÇÃO ADICIONAL PARA O MODELO RETARDANTE

A Este produto contém cloridrato de lidocaína (1%), um anestésico para dessensibilizar a ponta do pênis. Lave qualquer lubrificante após o uso. Evite contato com os olhos. Se você ou seu parceiro desenvolver erupção cutânea ou irritação, consulte um médico. Este produto não deve ser usado se você ou seu parceiro forem hipersensíveis (alérgicos) ao cloridrato de lidocaína ou a anestésicos do tipo amida.

FR **PRESERVATIFS EN LATEX LUBRIFIES**
INSTRUCTIONS POUR UTILISER, CONSERVER ET JETER LE PRESERVATIF

 Il est important de suivre les instructions d'utilisation pour obtenir une protection maximale.

- Décliner avec précaution l'emballage individuel ou un lot et sortir délicatement le préservatif. Attention aux objets qui peuvent endommager le préservatif en latex : ongles, bijoux, objets tranchants, etc.
- Mettre en place le préservatif uniquement quand la pénis est entièrement en érection et avant tout contact avec le corps de votre partenaire afin de prévenir les maladies sexuellement transmissibles (MST) et la grossesse. Placer le préservatif sur le bout du pénis en vérifiant que la tête à dérouler est à l'extérieur. Prenez suffisamment entre les doigts d'une main le haut du préservatif pour le dérouler sans le casser. Ne tirez pas trop fort sur le préservatif, car il pourrait se déchirer.
- Après l'acte main, dérouler le préservatif tout le long du pénis jusqu'à la base.
- Ne réutiliser pas le préservatif. Ne réutiliser pas le préservatif à la base du pénis, afin d'éviter de le faire passer de la base du pénis à l'anus. Ne réutiliser pas le préservatif en latex si vous souhaitez utiliser le préservatif, le jeter de façon hygiénique.
- ⚠ Le préservatif individuel présente un signe visible de dommage, n'utilisez pas le préservatif. Utilisez un nouveau préservatif pour chaque rapport sexuel. Si vous avez des doutes, jetez le préservatif et utilisez un nouveau.**
- ⚠ Le préservatif est à usage unique.** Si le préservatif est irrédicible, il faut savoir qu'il y a plus de risque d'être déchiré ou endommagé, de transmission des MST et d'une grossesse. Ne jamais le réutiliser. Si s'enroule sur lui-même pendant l'acte, le remettre en place immédiatement en le déroulant à nouveau. Si le préservatif glisse ou s'enlève entièrement, il peut être endommagé, en même temps que le pénis. Si le préservatif se déchire, se casse ou se rompt pendant l'acte, arrêter l'acte immédiatement et utiliser un nouveau préservatif. Si le préservatif est utilisé avec des fins de prévoir la grossesse, il est recommandé de recevoir une attention adéquate avant 72 heures dans un Centre ou un Etablissement Sanitaire qui effectue des diagnostics de planification.
- Si vous souhaitez une lubrification supplémentaire, utiliser de lubrifiants à base d'eau tels que la glycérine. Ne pas utiliser de lubrifiants à base de huile tels que la vaseline, la paraffine, huile pour bébé, les huiles essentielles, les huiles de massage, le beurre, la margarine et toutes autres huiles qui peuvent endommager le préservatif en latex.
- Ne pas utiliser le préservatif en latex si vous êtes allergique à lui. Il faut savoir qu'il y a une risque d'allergie ou d'irritation de la peau.
- Certains produits tels que médicaments ou autres, peuvent altérer l'efficacité du préservatif. Avant utilisation, toujours vérifier leur compatibilité avec le préservatif en latex après avoir lu votre pharmacie.

⚠ Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel. Le latex peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique. Si cela vous arrive ou à votre partenaire, consultez immédiatement un médecin.

☀ Stocker les préservatifs dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

Ne pas sortir le préservatif de son emballage individuel jusqu'au moment de son utilisation.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LE MODÈLE RETARDANT

A Ce produit contient du chlorhydrate de lidocaïne (1%), un anesthésique pour désensibiliser l'extrémité du pénis. Laver tout lubrifiant après utilisation. Éviter le contact avec les yeux. Si vous ou votre partenaire développez une éruption cutanée ou une irritation, consultez un médecin. Ce produit ne doit pas être utilisé si vous ou votre partenaire êtes hypersensible (allergique) au chlorhydrate de lidocaïne ou aux anesthésiques de type amide.

CONSEILS POUR SE PROTÉGER CONTRE LES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Les préservatifs en latex correctement utilisés peuvent prévenir la transmission des maladies occasionnées par les relations sexuelles: syphilis, gonorrhée, infections pour chlamydia, herpes génital, verrues génitales, hépatite B ou SIDA. L'utilisation d'un préservatif n'élimine pas totalement ces risques. Les MST peuvent se transmettre pendant les contacts intimes par les sécrétions corporelles ou par les lésions. Il donc est impératif de mettre un préservatif avant tout contact. Tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de votre pays.

RU ЛАТЕКСНЫЕ ПРЕЗЕРВАТИВЫ СО СМАЗКОЙ
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ

1. Разорвите вдоль одной стороны индивидуальную упаковку, аккуратно извлеките презерватив. Избегайте манипуляций с ним ногтями, украшениями, острыми предметами и т.д.,

- [illegible]

Некоторые лекарственные средства местного применения могут повлиять на эффективность латексных презервативов при контакте. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о совместимости этих препаратов с латексными презервативами.

Этот продукт изготовлен из латекса натурального каучука. Латекс может быть причиной различных аллергических реакций, включая анафилактический шок. В подобном случае немедленно обратитесь за медицинской помощью.

 Хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей и тепла.

 Не извлекайте презерватив из индивидуальной упаковки до момента его использования. Не используйте презерватив, если условия хранения были не соблюдены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ ЗАДЕРЖКИ

(A) Продукт содержит лидокаина гидрохлорид 1%, анестетик для снижения чувствительности головки полового члена. Смажьте лубрикант после использования. Избегайте контакта с

AR

لواقى الذكري اللاتكس المزلق

تعليمات الاستخدام والتخزين والتخلص

من المهم اتباع تعليمات الاستخدام للحصول على أقصى
 قم بتوزيع جانب واحد من الغلاف الفردي ، مع إزالة الواقية

[illegible][illegible][illegible]

شركاء. كما لا تستبعد أن تكون الفكرة هي العمل، من المستحسن طلب المساعدة العلمية من مركز مسعى أو منظمة إسرائيلية ضمن 72 ساعة¹⁴، كما أن الزوايا الفكرية يتناسب مع مناطق قلق غير العادة أو القرب، في يد ذلك من خطر محتمل أو باهتاج.

أما بعد: بماذا على أن تراقب إحصائي، المستبعد مواد التفرقة القابلة على الدماء من الطيور¹⁵. لا تستبعد مواد التفرقة القابلة على الزيت من الفرائق والأفراد وزيت الأطفال ومشغولات الجسيم والتعليق والزبد والسمن النباتي وما إلى ذلك، إن كان يمكن أن تلتف الزوايا الفكرية للتكسب، العمل الجسدي الفكري، من خطر آخر لا فائدة.

هذا المنتج مصنوع من العسل الطبيعي. بسبب اللزوجة الزائدة وفعل الحمضية، بما في ذلك مضخة الحامضية. إذا حدث ذلك، لا تأكله، فإليك المشورة الطبية على الفور.

تفاد بعض الأدوية، خصوصية على غفيرة التي تلتصق عند الاستعمال الجنسي، استشر الطبيب أو الصيدلي حول توافق هذه المنتجات مع الواسع الذي تلتصق على الاستعمال.

يحتوي على مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.

لا تقم بإزالة الوافق الفكري من لغة البريدي حتى لحظة استخدا مة .
لا تستخدم الوافق الفكري إذا لم يتم تخزينه بشكل مناسب.

معلومات إضافية عن نموذج التخليق


يحتوي هذا المنتج على ثيوكلادين هيدروكلوريد (94%) ، وهو مخزن إزالة ملوحة طرف القصب. اعمل أي مزق بلعق الاستخدام، تجنب ملامسة العينين. إذا أصبت أنت أو شريكك بلعق جلد حيوي أو تجمّع ، فاستشر الطبيب. لا ينبغي استخدام هذا المنتج إذا كانت أنت أو شريكك لديك حساسية معروفة (حساسية للثيوكلادين هيدروكلوريد) أو أي من نوع التشنج

توجهات التحلية من الأمراض المتعلقة جنسيا

عندما يفتقر الفرد إلى اللقاحات الصحيحة ، يمكن أن يمنع العدوى من الأمراض المتعلقة جنسيا ، مثل الزهري أو السيلان أو العدوى بالكالاميديا أو الهربس التناسلي أو الفيللثيا التناسلية أو التهاب الكبد (أ ، الإيدز) . استخدام الواقي الفكري لا يفي دائما بحظر انتقال العدوى من شخص إلى شخص .

تتطلب الأمراض المتعلقة جنسيا أذنه (العدوى) من خلال سوائل الدم أو (العدوى) ، لذلك يجب وضع الواقي الفكري في كل جنود أو الاتصال . يجب إبلاغ أي حدث غير متوقع يتعلق بالعدوى أو الشبهة لعضلة أو المنطقة المخصصة في ذلك .

							
ES	Producto sanitario	Fecha caducidad	Código de Lote	Identificador único del producto	Fabricante	Distribuidor	Fabricado en España
EN	Medical device	Expiration date	Batch Code	Unique Device Identifier	Manufacturer	Distributor	Made in Spain
RO	Aparat medical	Data expirării	Codul lotului	Identificator unic al dispozitivului	Produsător	distribuitor	Fabricat în Spania
ET	Medicinski pripravek	Rok trajanja	Koda serije	Unikaalne seadme identifikator	Proizvajalec	Turustaja	Vaistatud Hispaanias
LV	Medicīniskā iekārta	Derīguma termiņš	Parijags kods	Unikālais ierīces identifikators	Ražotājs	Izplatītājs	Ražots Spānijā
PT	Apareho médico	Data de validade	Código de lote	Identificador de dispositivo único	Fabricante	Distribuidor	Feito em Espanha
FR	Dispositif médical	Date d'expiration	Code du lot	identifiant unique du dispositif	Fabricant	Distributeur	Fabrique en Espagne
RU	Медицинское устройство	Дата окончания срока	Код партии	уникальный идентификатор устройства	Производитель	дистрибьютор	Сделано в Испании
AR	Dispositivo médico	Fecha de vencimiento	Código de lote	Identificador único del dispositivo	Proveedor	Distribuidor	Fabricado en España

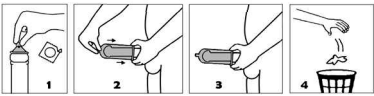

M2-PT-62 Rev. 2022/06

CEX INTERNACIONAL, S.A.
Canigó, 6 – 08520, Llerona
Les Franqueses, Barcelona (SPAIN)
www.cexint.com